

braintronics®

Body&Mind syncSystem


CASADA
HEALTHCARE

time to relax



KEEP THIS INSTRUCTION!
For household use only

TITAN





< timetorelax

Odkąd firma powstała w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów w sektorze wellness i fitness.

Dzisiaj, urządzenia marki CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design i skupienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich niezawodna jakość.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed użyciem tego urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażenia osób:

- 1) Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru. Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego, gdy nie jest używane oraz przed podłączaniem lub odłączaniem jakichkolwiek części.
- 2) Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
- 3) Używaj tego sprzętu wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Nie używaj dodatkowego wyposażenia niezalecanego przez producenta.
- 4) Nigdy nie używaj tego sprzętu, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działają prawidłowo, zostały uszkodzone, lub jeśli urządzenie ma kontakt z wodą – wyślij urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
- 5) Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
- 6) Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zablokowane. Otwory wentylacyjne powinny być wolne od kłaczków, włosów i tym podobnych.
- 7) Nie umieszczaj przedmiotów do otworów fotela masującego.
- 8) Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- 9) Nie stosować w miejscach, w których używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub podawany jest tlen.
- 10) Aby wyłączyć, ustaw wszystkie przełączniki w pozycji wyłączenia, a następnie odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.

Gratulacje!

Dziękujemy za wybranie fotela do masażu marki Casada. Cieszymy się, że możemy wspierać Twoje zdrowie.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby dokładnie zapoznać się z prawidłową obsługą urządzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy fotel do masażu TITAN .



Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	174
Panel szybkiego sterowania.....	176
Opis i funkcje	177
Nazwy i funkcje przycisków	178
Polecenia głosowe	179
Przed użyciem.....	180
Przesuwanie fotela.....	185
Podłączanie do zasilania.....	186
Uruchomienie	186
Sterowanie podnóżkiem	187
Ekran	187
Opieka i utrzymanie	190
Rozwiązywanie problemów	191
Dane techniczne	191
Właściwości.....	192
Europejska deklaracja zgodności	197
Warunki gwarancji.....	197

Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem przeczytaj uważnie ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.


- Poniższe środki ostrożności i ostrzeżenia pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia.
- Klasy wypadków spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem podzielono na OSTRZEŻENIE i UWAGA. Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA i UWAGI poniżej, i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

 OSTRZEŻENIE	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników.
 UWAGA	Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników lub uszkodzenie produktu.


	Zabronione		NIE demontować
---	------------	---	----------------

Nie nadaje się dla osób wymienionych poniżej.

Zalecamy, aby osoby z którymkolwiek z poniższych schorzeń skonsultowały się z lekarzem przed użyciem.


 OSTRZEŻENIE	<ul style="list-style-type: none">• Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub urządzeniami elektronicznymi.• Osoby w trakcie leczenia, zwłaszcza te, które nie czują się dobrze.• Osoby z nowotworami złośliwymi, ostrą chorobą, chorobami serca lub ciężkim nadciśnieniem wymagają nadzoru.• Kobiety w ciąży lub menstruujące.• Osoby z osteoporozą, zniekształconymi stawami, dysfunkcją lub niedawnym złamaniem.• Osoby z poważnymi lub zranionymi chorobami skóry.• Osoby z wysoką gorączką.• Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia i pozostawać pod nadzorem.• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane, lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.• To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze, oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem, lub zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób, i rozumieją związane z tym zagrożenia.
---	---

Środki ostrożności dotyczące pilota


 UWAGA	<ul style="list-style-type: none">• Nie obsługiwaj pilota mokrymi rękami, ani nie ciągnąc na siłę za przewód regulatora.• Nie wlewaj wody, ani innych płynów do sterownika, aby uniknąć usterki.• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kontrolerze.
---	---

Instrukcja bezpieczeństwa


Przestrogi dotyczące złączy zasilania i przewodu zasilającego

 UWAGA	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.• Fotel masujący może być zasilany wyłącznie niskim, bezpiecznym napięciem, odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.• Nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.• Nie ciągnij za przewód zasilający, sięgnij do jego przedniej strony, aby go odłączyć.• Nie ściskaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.• Nie uszkadzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj przewodu zasilającego.• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
---	---

Wymagania




 UWAGA	<ul style="list-style-type: none">• Nie używaj tego urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza 40°C.• Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub zakurzonej otoczeniu.• Należy odłączyć urządzenie od gniazdka podczas burzy lub wyładowań atmosferycznych.• Nie używać na zewnątrz.• Produkt należy umieścić na płaskiej, równej podłodze.• Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
---	---

Optymalne środki dla bezpiecznego użytkowania


 UWAGA	<ul style="list-style-type: none">• Tylko dla użytkowników o wadze poniżej 120 kg.• Nie używaj innego urządzenia terapeutycznego razem z tym produktem.• Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.• Urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę, nie obsługują go dwie lub więcej osób w tym samym czasie, aby uniknąć uszkodzenia produktów.• Nie używaj produktu bezpośrednio po posiłku, może to spowodować dyskomfort.• Zdejmij akcesoria z ramion i opróżnij kieszenie podczas masażu.• Sprawdź tapicerkę pod poduszkami i w innych miejscach, jeśli jest uszkodzona nie używaj go, i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.• Jeśli odczuwasz jakiś nietypowy dyskomfort podczas użytkowania, natychmiast wyłącz zasilanie i nie używaj produktu.• Za każdym razem korzystaj z urządzenia przez 20 minut.• Upewnij się, że za fotelem masującym nie ma przeszkód i jest wystarczająco dużo przestrzeni przed regulacją kąta oparcia lub podnóżka.• Upewnij się, że żadne inne nadmierne obciążenie, nie jest naciskane na oparcie lub podnóżek, trzymać dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty z dala od odchylanego oparcia urządzenia / przedłużenia podnóżka, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.• Podczas korzystania z urządzenia należy siedzieć w prawidłowej pozycji, aby uniknąć obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.• Nie ciągnij, nie popychaj, nie staczaj fotela na jego kółkach po drewnianej podłodze lub dywanie, aby uniknąć uszkodzeń.
---	---

Instrukcja bezpieczeństwa

Optymalne środki ostrożności dla bezpiecznego użytkowania


 <p>ZABRONI- NY</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzone / odsłonięte części lub upływ prądu.• Nie stawaj na podnóżku ani nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.• Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się fotelem masującym.• Nie zasypiaj podczas działania urządzenia.• Unikaj używania produktu pod wpływem alkoholu.• Nie wkładaj rąk, ani obcych przedmiotów do otworów urządzenia, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.• Jeśli podczas pracy pojawi się dym lub dziwny zapach, natychmiast zaprzestań użytkowania.
 <p>NIE ROZBIERAJ</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nie demontuj tego produktu, aby uniknąć awarii.• Nie podejmuj prób naprawy lub demontażu urządzenia samodzielnie.• Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem.
 <p>ODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY</p>	<ul style="list-style-type: none">• Przed przystąpieniem do konserwacji, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka zasilającego.• Nigdy nie podłączaj, ani nie wyciągaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia lub obrażenia.• Po użyciu wyciągnij przewód zasilający z gniazdka zasilającego.• Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nastąpi odcięcie zasilania.

Panel szybkiego sterowania

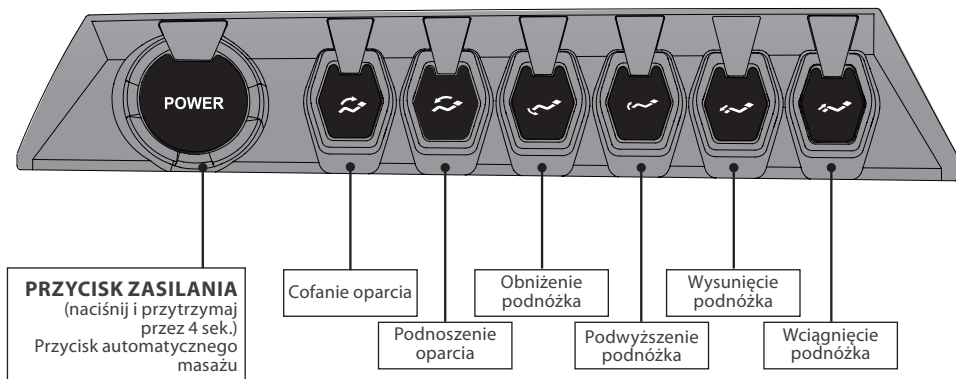


Opis i funkcje

Funkcje zewnętrzne fotela

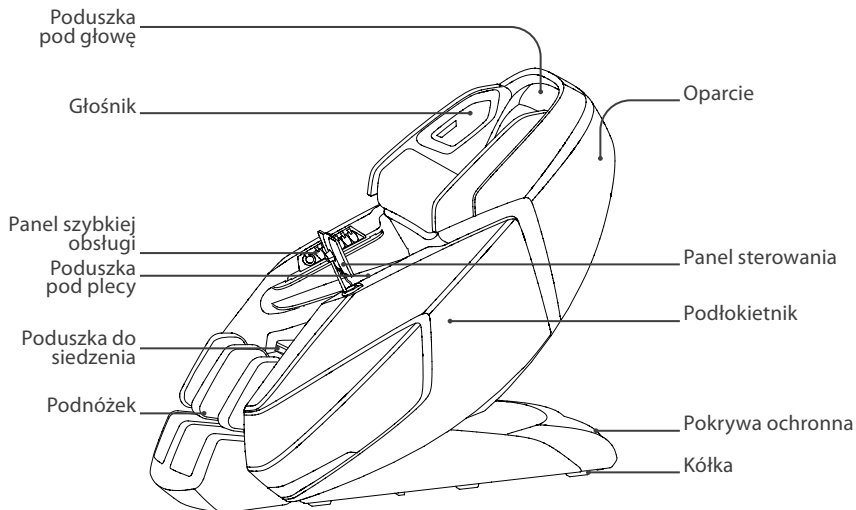



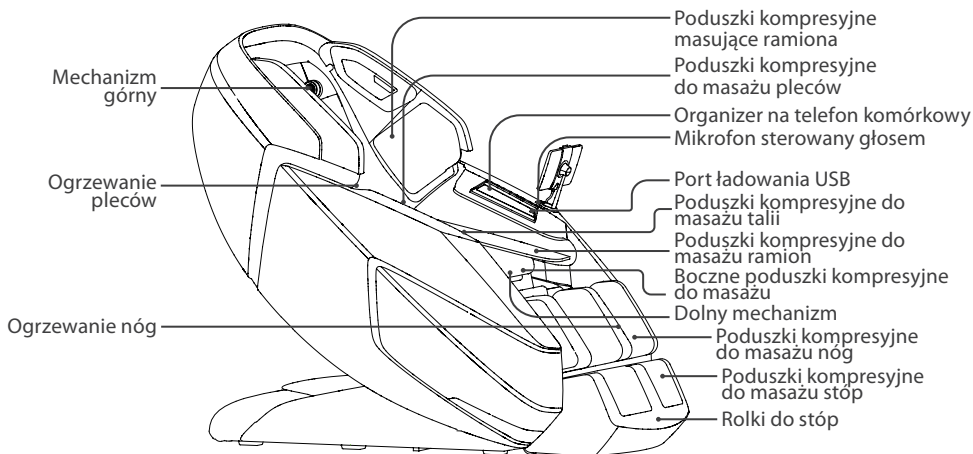




Funkcje wewnętrzne fotela



Nazwy i funkcje przycisków

Panel szybkiego sterowania / opis przycisków

	Przycisk zasilania / automatycznego masażu Długie naciśnięcie przycisku (ok. 4 sekundy) umożliwia włączanie i wyłączenie fotela masującego. Szybkie naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie między automatycznymi programami masażu.
	Cofanie oparcia Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odchylić oparcie; zwolnij przycisk, aby zatrzymać. Kiedy oparcie jest ustawione w trzeciej ćwiartce, zatrzymuje się i czeka, aż dolny mechanizm osiągnie bezpieczną odległość, zanim przestawi się dalej.
	Podnoszenie oparcia Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby podnieść oparcie do pozycji pionowej; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Obniżenie podnóżka Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby obniżyć podnóżek, zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Podwyższenie podnóżka Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby podnieść podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Wysunięcie podnóżka Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać. (Upewnij się wcześniej, że jest wystarczająco dużo miejsca).
	Wciągnięcie podnóżka Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby schować podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.

Polecenia głosowe

Polecenia głosowe dostępne są jedynie w języku angielskim i niemieckim. Zapoznaj się z nimi na stronie 11 (niemiecki) lub 39 (angielski).

Aby włączyć sterowanie głosowe, wystarczy dotknąć kwadratowego przycisku na lewym podłokietniku obok mikrofonu sterującego głosem i powiedzieć „Witaj, mój masażyście”. Po włączeniu sterowania głosowego usłyszysz „Wypowiedz swoje polecenie”. Upewnij się, że fotel do masażu jest włączony, aby go aktywować.



Funkcja	Ilustracja	Angielski	Niemiecki	Inne języki
Polecenie głosowe		Język i głos są w języku angielskim	Język i głos są w języku niemieckim	Domyślny język angielski
Wyjście głosowe		Język i głos są w języku angielskim	Język i głos są w języku niemieckim	Domyślny język angielski
Gdy głośność jest wyłączona lub zmniejszona do zera		Gdy głośność jest wyłączona lub zmniejszona do zera, fotel nie mówi, ale nadal wykonuje polecenia głosowe w języku angielskim.	Gdy głośność jest wyłączona lub zmniejszona do zera, fotel nie mówi, ale nadal wykonuje polecenia głosowe w języku niemieckim.	ON Jeśli wybierzesz inny język, fotel nie mówi. Ale nadal możesz wydawać polecenia (w języku angielskim).
Uwaga	Angielski jest domyślnie ustawiony jako język w stanie dostawy. Komunikaty głosowe i sterowanie głosowe są również w języku angielskim.			

Przed użyciem

Pozycja i umiejscowienie do instalacji

Odstępy niezbędne dla fotela:

- Upewnij się, że jest wystarczająca wolna przestrzeń do instalacji: potrzeba 10 cm wolnej przestrzeni do odchylenia oparcia, 60 cm wolnej przestrzeni na wysunięcie podnóżka i przesunięcie do przodu fotela.
- Trzymaj go 1 metr od telewizora, radia lub innego urządzenia audio / wideo, aby uniknąć zakłóceń sygnału.

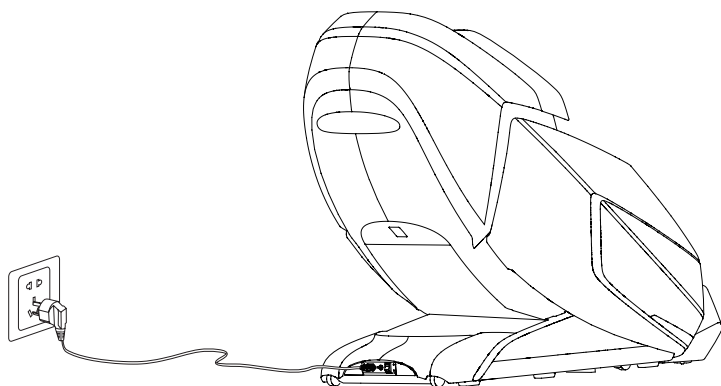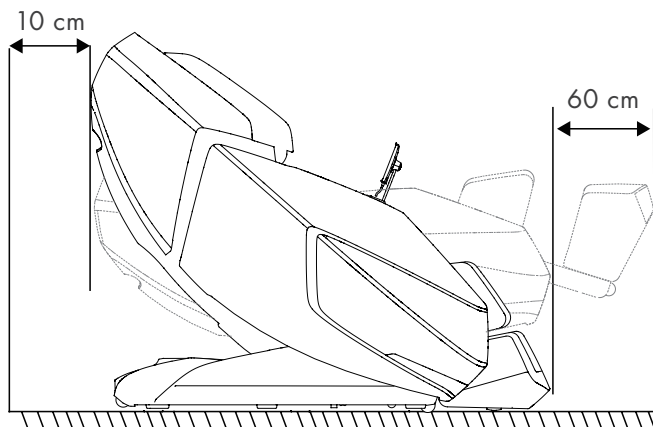


UWAGA

- Zachowaj odległość między gniazdkiem, a wyłącznikiem zasilania w granicach 1,5 metra, aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego podczas przesuwania się fotela do masażu.
- Wyprostuj przewód zasilający podczas używania, aby uniknąć splątania lub uszkodzenia.
- Kiedy fotel masujący przesuwają się do przodu lub do tyłu, sprawdź, czy w pobliżu nie ma dzieci, zwierząt, ani innych przeszkód, aby skutecznie uniknąć wypadków.

Przed użyciem

Ochrona podłogi

Zalecamy umieszczenie pod fotelem kawałka dywanu lub miękkiej maty, aby uniknąć uszkodzenia podłogi i wytłumić hałas podczas poruszania się fotela.

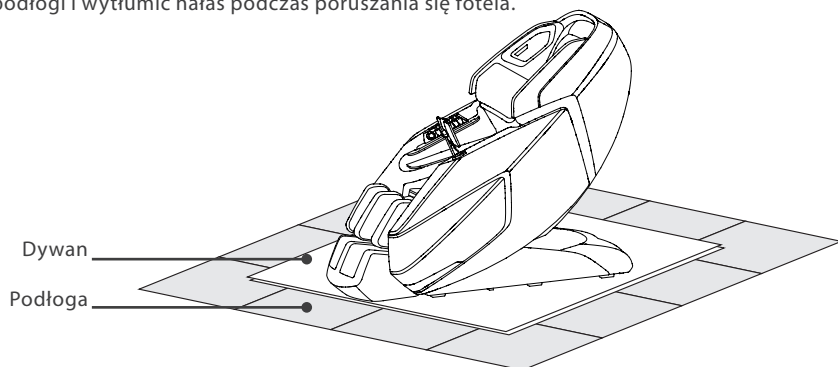

Otoczenie

	Unikaj używania fotela masującego w miejscach o dużej wilgotności, na przykład w pobliżu basenów lub łaźni, aby zapobiec wypadkom spowodowanym porażeniem przez prąd elektryczny.
	Aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia fotela masującego, należy trzymać go z dala od gorących powierzchni.

Uziemienie

	To urządzenie musi być odpowiednio uziemione. Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego 3-przewodowego gniazdka z uziemieniem, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i regulacjami, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
--	---


Instalacja

Krok 1: Wymij wszystkie części fotela do masażu z pudełek

- Rozpakuj pudełko: Usuń z pudełek całą wyściółkę i akcesoria.
- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zawiera wszystkie elementy.

Krok 2: Montaż podłokietników


- Podłączyć ponumerowane węże powietrzne do odpowiednio ponumerowanego zaworu powietrza w podłokietniku i włożyć złącza (złącza są dopasowane kolorystycznie). Powtórz dla drugiego podłokietnika.

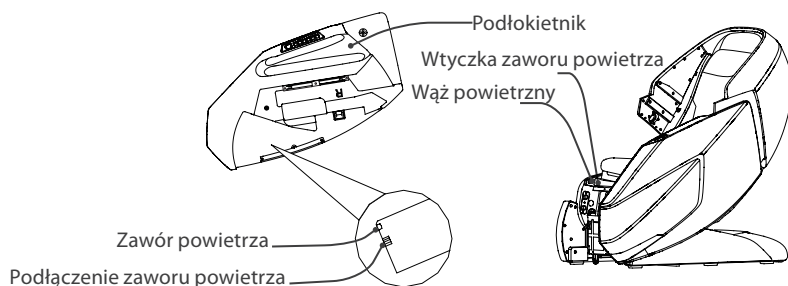

Przed użyciem


Instalacja | Krok 2: Montaż podłokietników

Przytrzymaj podłokietnik i zacpek wspornik 2 w rowku wspornika: powoli wsuń podłokietnik w ramę fotela, aż wspornik 2 zostanie całkowicie wyrównany ze wspornikiem 4. Wsuń wspornik 1 do wspornika 3 i zamocuj podłokietnik za pomocą śrub (ta sama metoda montażu drugą stroną).

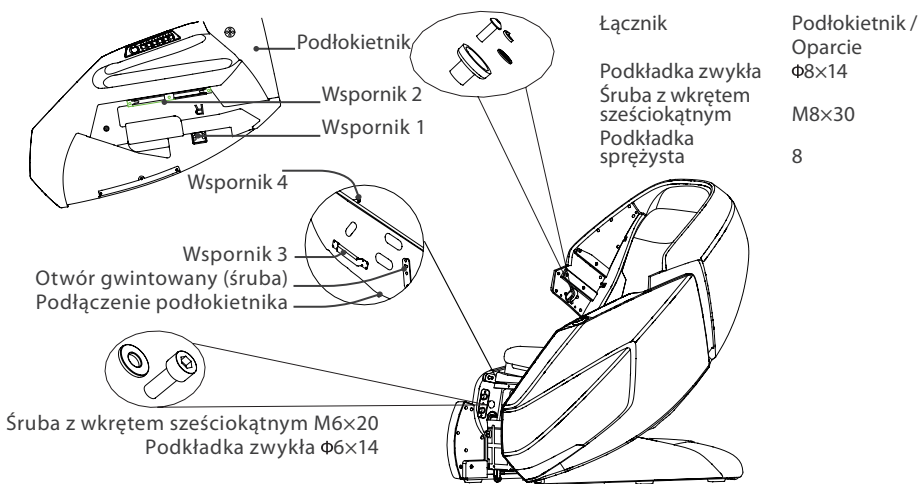

Instalacja | Krok 3: Montaż części barkowej


- Połącz wtyczki głośnika z odpowiednimi złączkami na ramie czołowej, zainstaluj część barkową w ramie głowy i podłącz dyszę powietrza do przyłączy powietrza (ta sama metoda montażu z drugiej strony).
- Następnie zabezpiecz 2 szt. Śruby M4 × 16 i 5 szt. Śruby M5 × 20.

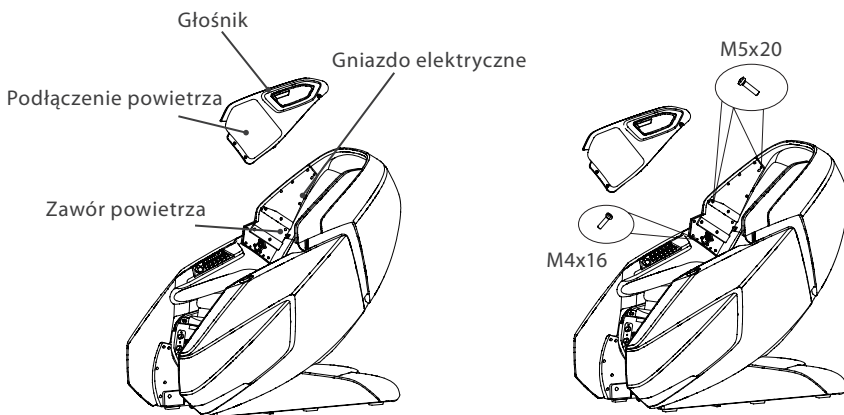


Przed użyciem

Instalacja | Krok 4: Mocowanie podnóżka

Podnieś część nożną, włóż wąż powietrza do zaworu powietrza i włóż wtyczkę zaworu powietrza do złącza zaworu powietrza znajdującego się z przodu siedzenia, upewniając się, że są dobrze zamocowane.

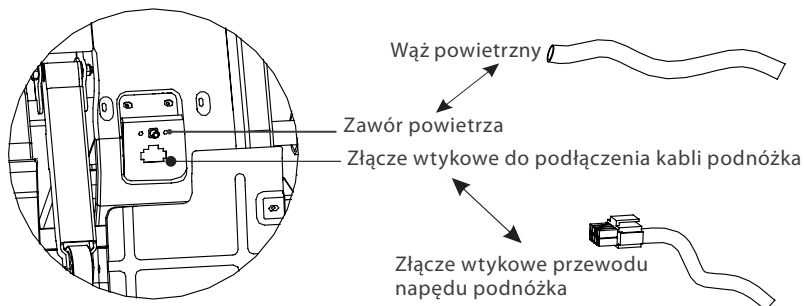


Włóż tuleję wspornika nóg do wspornika podnóżka, przymocuj ją do obrotowego wałka wspornika nóg, a następnie przymocuj zacisk zabezpieczający DK do końca śruby wspornika nóg, aby utrzymać wspornik nóg w miejscu, a następnie wepnij podnóżek.

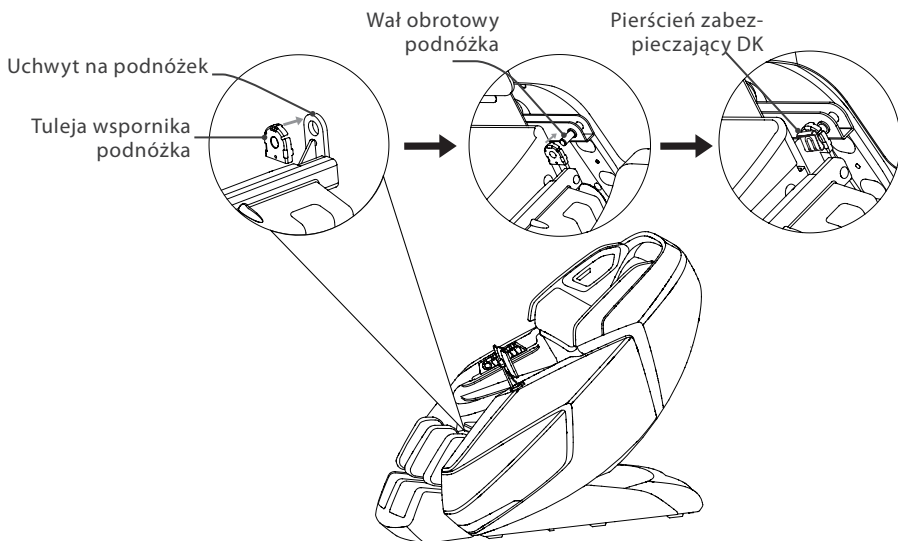

Przed użyciem


Instalacja | Krok 5: Instalacja uchwytu pilota

Wykręć śrubę z podstawy, włóż uchwyt pilota do podstawy i zabezpiecz go śrubą M4, a następnie umieść element ozdobny na górze.

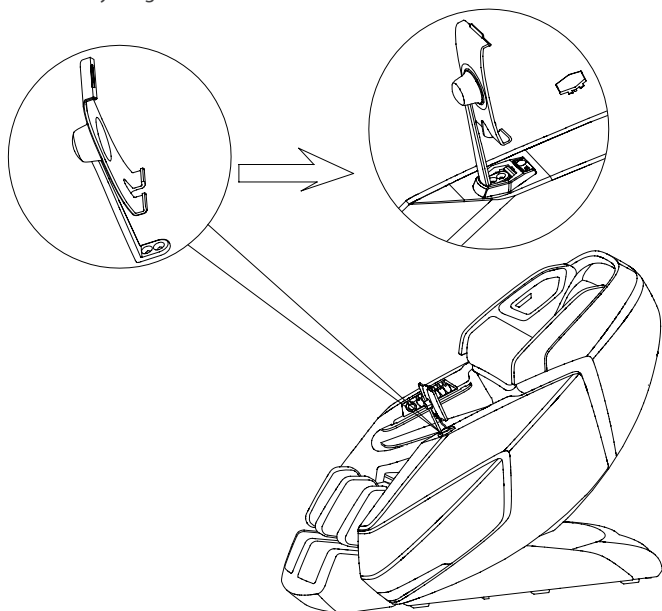

Instalacja | Krok 6: Instalacja wspornika pilota


Podłączyć przewód sterujący do złącza fotela masującego (przed podłączeniem wyrównać styki ze złączem), aby zabezpieczyć złącze, a następnie dokręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

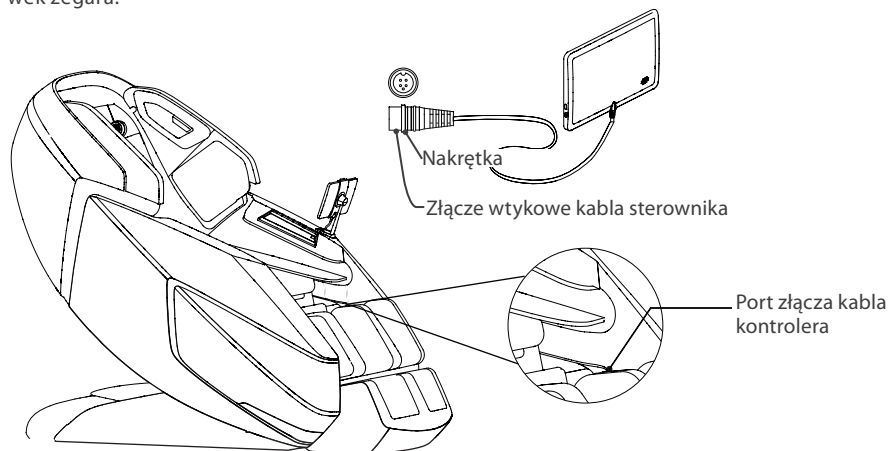

Przed użyciem


Instalacja | Krok 7: Końcowe podłączenie

- Podłączyć kabel sieciowy do gniazda sieciowego na urządzeniu. Podłącz fotel do zasilania, włącz wyłącznik i za pomocą pilota podnieś oparcie do pozycji całkowicie wyprostowanej.
- Włącz przełącznik zasilania i za pomocą pilota podnieś oparcie do pozycji całkowicie wyprostowanej.

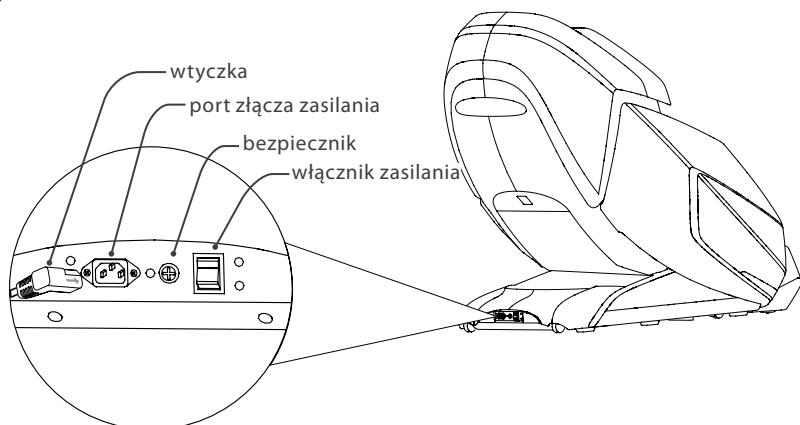

Przesuwanie fotela

- Ustawić oparcie w pozycji pionowej.
- Wyłączyć wyłącznik sieciowy i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W dwie osoby pchnąć oparcie w dół i podnieść fotel do przodu chwytając za uchwyt znajdujący się w górnej części podłokietnika, a tylnej fotela podłokietnika (patrz szkic).
- Przetoczyć fotel na kółkach w żądane miejsce.

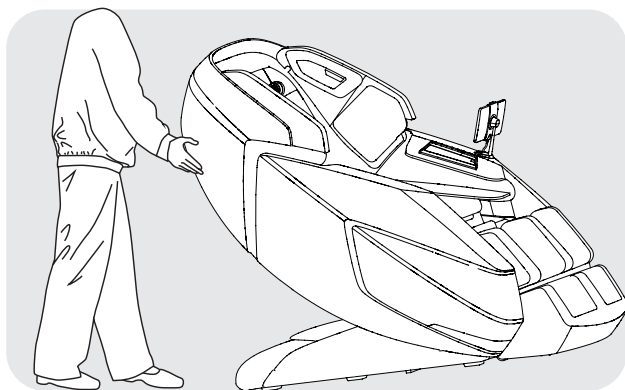

UWAGA

- Nie przesuwaj fotela, gdy siedzi na nim jakaś osoba.
- Do transportu nie podnoś fotela za podnóżek lub podłokietnik, nie trzymaj stelaża i nie stabilizuj oparcia (fotel powinien być transportowany w 4 osoby).

Podłączanie do zasilania

- Podłącz urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
- Włącz główny włącznik z tyłu fotela masującego.




UWAGA

- Przed włączeniem fotela masującego sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Przed podłączeniem do zasilania sprawdź, czy główny włącznik zasilania jest wyłączony.

Uruchomienie

- Za pomocą regulatora opuść oparcie do najniższej możliwej pozycji, podnieś podnózek i wysuń go do najwyższej pozycji, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca przed uruchomieniem.
- Przywróć oparcie i podnózek do ich standardowych pozycji po pierwszym uruchomieniu. Aby wybrać program masażu, zapoznaj się z instrukcją obsługi panelu sterowania oraz instrukcją pilota.

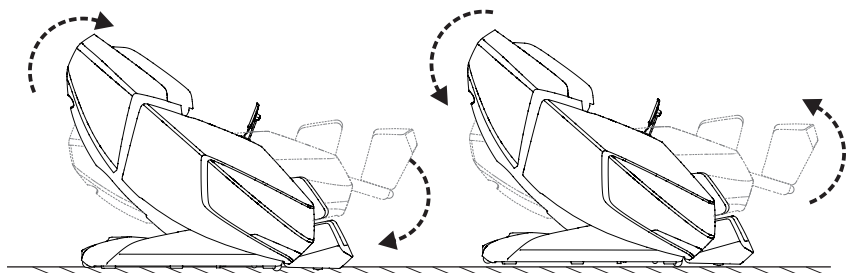

Zanim usiądziesz na fotelu masującym:



- Upewnij się, że podnózek jest dobrze dopasowany, zanim usiądziesz na fotelu masującym.
- Upewnij się, że fotel masujący został przywrócony do swojej pierwotnej pozycji, zanim na nim usiądziesz.
- Jeśli jakkolwiek część nie znajduje się w swojej standardowej pozycji, wyłącz fotel masujący, aby mógł powrócić do swojej pierwotnej pozycji.




UWAGA

- Nie siadaj na fotel z podniesionym podnóżkiem.
- Nie należy nadmiernie obciążać podnóżka, w celu uniknięcia uszkodzeń.

Sterowanie podnóżkiem

Naciśnij i przytrzymaj  lub  ten przycisk, aby wysunąć (upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca) lub wsunąć podnóżek do pożądanej pozycji, aby uzyskać optymalny efekt masażu. Zwolnij przycisk, aby ustawić pozycję.

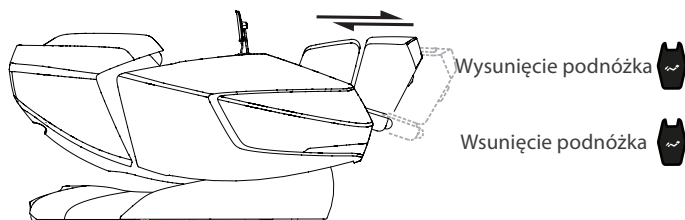

Czujnik jest przymocowany do spodu podnóżka, podnóżek automatycznie dostosowuje długość, gdy tylko fotel zostanie uruchomiony.




OSTRZEŻENIE

- Prosimy nie używać fotela masującego do zabawy i unikać niewłaściwego obchodzenia się z nim. Upewnij się, że nie ma przeszkód podczas podnoszenia lub odchylania oparcia i podnóżka.
- Nie należy umieszczać stóp, palców, ani innych przedmiotów w przestrzeni między siedziskiem, a oparciem / podnóżkiem, gdy jest on w pozycji leżącej, podnoszonej lub odchylonej.
- Przed opuszczeniem fotela masującego upewnij się, że fotel masujący został przywrócony do swojej pierwotnej pozycji.

Po użyciu

- Umieść pilot w uchwycie.
- Wyłącz włącznik sieciowy i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używany, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu fotela przez dzieci.
- Jeśli fotel masujący nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy przykrycie fotela, zwinięcie kabla sieciowego i umieszczenie urządzenia w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci.

Ekran

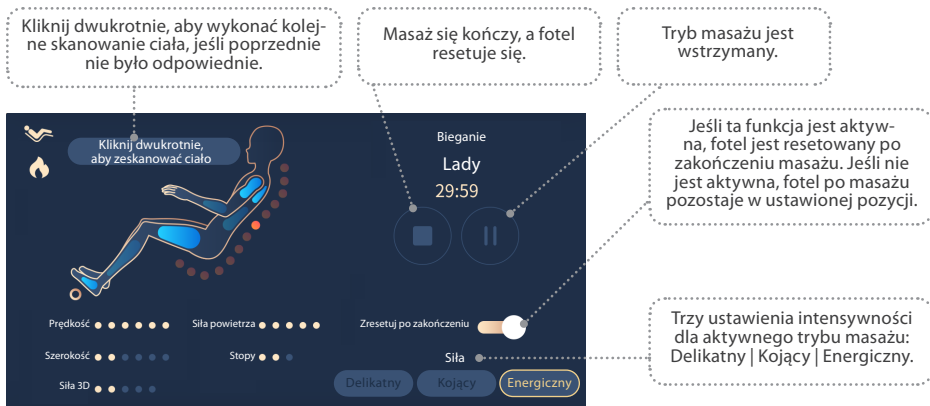

Kliknij dwukrotnie, aby wykonać kolejne skanowanie ciała, jeśli poprzednie nie było odpowiednie.

Masaż się kończy, a fotel resetuje się.

Tryb masażu jest wstrzymany.

Jeśli ta funkcja jest aktywna, fotel jest resetowany po zakończeniu masażu. Jeśli nie jest aktywna, fotel po masażu pozostaje w ustawionej pozycji.

Trzy ustawienia intensywności dla aktywnego trybu masażu: Delikatny | Kojący | Energiczny.

Kliknij dwukrotnie, aby zeskanować ciało

Bieganie
Lady
29:59

Prędkość ●●●●●●●●●● Siła powietrza ●●●●●●●●●● Zresetuj po zakończeniu

Szerokość ●●●●●●●●●● Stopy ●●●●●●●●●● Siła ●●●●●●●●●●


Sila 3D ●●●●●●●●●● Delikatny Kojący Energiczny

Ekran



Wybierz jeden z przedstawionych programów masażu (**ekran startowy 1 (1)**) lub przesunij palcem w lewo na ekranie dotykowym, aby wyświetlić **ekran startowy 2 (2)**.


Przed każdym zaprogramowanym/automatycznym masażem wykonywane jest **skanowanie ciała (3)**, a następnie automatycznie włącza się **ekranu programu masażu (4)**. Po zakończeniu masażu fotel jest resetowany.

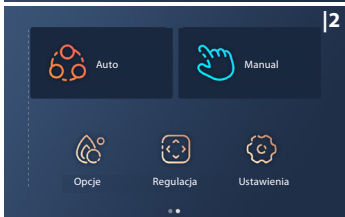

Pod ikoną **Auto (5)** znajduje się 12 zaprogramowanych automatycznych programów masażu wellness do wyboru: Regeneracja, Rozluźnianie, Orzeźwienie, Gentleman, Lady, Senior, Kark i barki, Talia i biodra, Plecy i kręgosłup, Tajski, Starożytny i Wypychający.



Wybierając **Manual (6)** możesz stworzyć masaż według własnych upodobań. Najpierw wybierz żądaną technikę masażu. Następnie przesunij palcem w lewo, aby powrócić z ekranu **programu masażu (4)** do **ekranu startowego 2 (2)**. Teraz możesz ustawić dalsze parametry masażu w trybie **Manual (6)**.

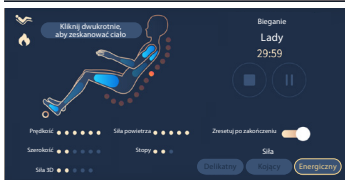

Techniki masażu: ugniatanie, synchronizacja, ostukiwanie, Shiatsu i 3D Shiatsu. Dotknij ikony, aby rozpocząć.

Zakres: całkowity, częściowy i punktowy. Gdy działa masaż punktowy, ikona punktu skupienia wyświetlana jest na ekranie. Dotknij i przytrzymaj symbol, aby ustawić żądaną pozycję masażu.

Szerokość: szeroka, średnia i wąska. Szerokość nie jest regulowana po wybraniu ugniatania lub synchronizacji.

Siła 3D: 5 poziomów (0 / Wył. – 5) i Off (Wyłącza siłę 3D). Siła 3D nie jest regulowana po wybraniu techniki 3D Shiatsu.

Prędkość: 6 poziomów. Prędkości nie można regulować, jeśli wybrano Shiatsu lub 3D Shiatsu.



Pod ikoną **Opcje (7)** znajdziesz następujące opcje: Kompresja, Rollery stóp, Ogrzewanie pleców i Ogrzewanie nóg, które możesz ustawić i dostosować podczas sesji masażu.



Masaż kompresyjny: pełny, ramiona, plecy, biodra i nogi. Dotknij ikony, aby rozpocząć.

Siła kompresji: 5 poziomów i off (wyłącza kompresję).

Rollery stóp: 3 poziomy i off (wyłącza rolki do stóp). Tej opcji nie można regulować, jeśli wybrane został masaż poduszkami powietrznymi w pozycjach „pełny” lub „nogi”.



Ogrzewanie pleców: 3 poziomy i off (wyłącza

Ekran



Ogrzewanie nóg:

ogrzewanie pleców.
3 poziomy i off (wyłącza ogrzewanie nóg).

W sekcji **Regulacja (8)** można ustawić Zero Gravity, czas masażu i pozycję oparcia. Podnóżek można regulować w górę / w dół, odsuwać lub dosuwać.



Zero Gravity:

Zero 1, Zero 2 i Off (wyłącza funkcję Zero Gravity).

Czas masażu:


10 min, 20 min i 30 min.

Ułożenie:

dotknij i przytrzymaj symbol, aby pochylić / podnieść oparcie fotela masującego.

Nogi:

dotknij i przytrzymaj symbol, aby podnieść / opuścić podnóżek fotela masującego.

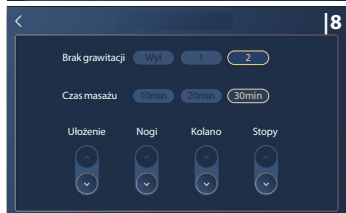


Kolana:

Dotknij i przytrzymaj symbol, aby przesunąć górną część podnóżka w górę / w dół.

Stopy:

dotknij i przytrzymaj symbol, aby wysunąć / dosunąć podnóżek.

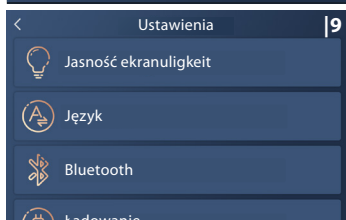

W **Ustawieniach (9)** znajdziesz jasność ekranu, wybór języka, Bluetooth, ładowanie, dźwięki i informacje o kontrolerze ekranu dotykowego. Dotknij symbolu, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Po zakończeniu masażu fotel masujący jest resetowany i wyświetlany jest **ekran resetowania (10)**.



Opieka i utrzymanie

Instrukcja pielęgnacji

- Aby usunąć plamy na panelu tylnym, podłokietniku, podnóżku, częściach plastikowych lub plamach na wężu powietrznym: wyczyścić łagodną pianką czyszczącą, a następnie wytrzeć suchą szmatką.
- Aby usunąć plamy na pilocie, skrzynce sterowniczej: wytrzeć suchą szmatką.
- Aby usunąć plamy na tapicerce oparcia lub poduszkach: użyj wyłącznie środka do czyszczenia tapicerki na bazie wody, wytrzyj wilgotną szmatką, a następnie pozostaw do wyschnięcia.
- Aby wyczyścić pokrowce na nogi / łydki, zdejmij je z fotela, wyczyść ręcznie łagodnym detergentem, a następnie pozostaw do wyschnięcia.



OSTRZEŻENIE

- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.
- Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Upewnij się, że środek czyszczący nie dostanie się do skrzynki sterowniczej podczas czyszczenia.
- Nie używaj benzenu, rozpuszczalnika do czyszczenia urządzenia, ponieważ może to spowodować blaknięcie lub uszkodzenie fotela.
- Nie prasować tapicerki.

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przykryć je czystą szmatką, aby uniknąć gromadzenia się kurzu.



UWAGA

- Nie wystawiać tego urządzenia na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie.

Podczas codziennego użytkowania należy sprawdzić, czy nie występują następujące problemy:

- Zapach spalenizny.
- Zasilanie sieciowe migocze podczas dotykania przewodu zasilającego
- Przewód zasilający jest gorący.
- Inne nietypowe dodatki.



UWAGA

- Jeśli wystąpią powyższe problemy, należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub obrażeń.
- Wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Skontaktuj się z lokalnym dealerem lub dostawcą w celu naprawy.
- Wszystkie inne czynności konserwacyjne, z wyjątkiem powyższej pielęgnacji i konserwacji, powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę lub centrum serwisowe.



OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Nie próbuj samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia, należy zlecić naprawę fotela do autoryzowanego serwisu.

Rozwiązywanie problemów

Nr.	Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
1	Podczas użytkowania występuje hałas	Hałas może wydobywać się z silnika pompy powietrza lub innych części mechanicznych ocierających się o materiałowy pokrowiec.	Nie jest wymagane żadne działanie
2	Fotel się nie uruchamia	W gniazdku nie ma kabla sieciowego	Włóż prawidłowo wtyczkę sieciową do gniazdka
		Włłącznik sieciowy jest wyłączony	Włącz przełącznik
		Przepalony bezpiecznik	Wymień go tylko na bezpiecznik tego samego typu
3	Głośnik nie odtwarza muzyki	Głośność jest ustawiona na najniższy poziom.	Odpowiednio dostosuj głośność.
		Bluetooth jest wyłączony	Włącz Bluetooth
		Bluetooth jest połączony z innym urządzeniem	Podłącz ponownie Bluetooth
4	Nie można odchylić/podnieść oparcia fotela lub podnóżka	Na oparcie lub podnóżek wywierany jest nadmierny nacisk.	Zmniejsz ciśnienie i spróbuj ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu konserwacji.

Ważne: Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Nasza firma nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody spowodowane przez nieautoryzowane serwisowanie.

Dane techniczne

Nazwa: Titan Massage Chair
Model: TITAN
Napięcie nominalne: 220-240V~
Częstotliwość nominalna: 50-60Hz
Moc nominalna: 180W
Certyfikaty:



Klasa ochrony elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego: Klasa I

Właściwości

	BRAINTRONICS® Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.
	WAŁKOWANIE Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemiennie napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.
	UGNIATANIE Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.
	KOMPRESJA POWIETRZNA Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ na okolice łydek i stóp.
	OGRZEWANIE WĘGLOWE PODCZERWONE Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą ciepło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni.
	UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION) Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jednoczesne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia.
	OSTUKIWANIE Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłońią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc.
	WAŁKOWANIE STÓP Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.
	GŁOŚNOŚĆ Regulacja głośności – funkcja działa wyłącznie dla programów Braintronics.

Właściwości

	KSZTAŁT „L” Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.
	LINIA-S Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bardzo blisko ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygięcie kręgosłupa.
	OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe rozwiązanie, zapewniające komfort użytkownika!
	ZERO GRAWITACJI Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na kręgosłup, odciążając go całkowicie.
	PROGRAM AUTOMATYCZNY Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.
	CAŁE PLECY Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich gabarytów.
	POPRAWA KONDYCJI STAWÓW Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje ona chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajając płyny i składniki odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg.
	POZYCJA LEŻĄCA Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego komfortu użytkownika.
	DOPASOWANIE RAMION Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.

Właściwości

	INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.
	OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie.
	ROZCIĄGANIE PLECÓW Masaż skoncentrowany na rozciąganiu pobudza ciało i ma ożywczy wpływ na cały organizm.
	SHIATSU Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągającym – rotacyjnym. Jego celem jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzenie mięśni.
	MASAŻ RAMION Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspianą wpływ na wszelkie dolegliwości w tym obszarze.
	ROZCIĄGANIE TALII Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. Działa świetnie na napięcia.
	MASAŻ PUNKTOWY Główice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.
	PRĘDKOŚĆ Regulacja prędkości masażu.
	SZEROKOŚĆ Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).

Właściwości

	MUZYKA Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.
	BLUETOOTH Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.
	PUNKTY AKUPRESURY Masaż kluczowych punktów akupresury.
	REFLEKSOLOGIA Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich organów wewnętrznych.
	UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI Specjalnie zaprojektowane główce masujące imitują ruchy dłoni masażyisty. Maksymalny kąt nachylenia fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry fotela sorawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny niemal tak samo, jak masaż manualny.
	ŁADOWARKA USB Podczas kojącego masażu za pomocą zintegrowanego portu USB możesz naładować swój telefon komórkowy.
	SZYBKI DOSTĘP Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczkach fotela możliwe jest sterowanie najważniejszymi funkcjami urządzenia.
	ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana technologia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je ewentualną korektę po zakończeniu skanowania.
	PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z CIENKIM EKRANEM DOTYKOWYM Za pomocą ekranu dotykowego można wygodnie wybrać żądany masaż i dostosować wszystkie jego ustawienia. Możesz poruszać się po menu, klikając przyciski, aby wybrać programy masażu Kark i barki, Dolne plecy, Auto, Manualny, Zaawansowany lub Masaż Kompresyjny. Opcjonalnie można ustawić czas masażu w przedziałach dziesięciminutowych, zaczynając od 10 minut aż do 30 minut.

Właściwości

	MASAŻ 3D Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale także do przodu i w tył.
	POZYCJA ODCHYLENIA 165 ° Oparcie regulowane elektrycznie o możliwości jego odchylenia do 165 stopni.
	2 ROBOTY MASUJĄCE Dwa mechanizmy masujące działające niezależnie od siebie.
	KONTROLA GŁOSU Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.
	OGRZEWANIE GRAFENOWE W PODNÓŻKU Uruchamiane jest razem z funkcją ogrzewania okolicy lędźwiowej. Dzięki zastosowaniu grafenu rozgrzewa się w przeciągu kilku minut.
	DOPASOWANIE PODUSZKI W razie konieczności podwójna poduszka zredukuje intensywność masażu karku i barków.
	SYSTEM NAGŁOŚNIENIA BLUETOOTH AMPHITHEATRE Fotel do masażu wyposażony jest w technologię Bluetooth i system dźwiękowy „amfiteatr”, który redukuje szumy otoczenia i zwiększa wrażenia dźwiękowe. W ten sposób możesz cieszyć się masażem z włączoną ulubioną aplikacją medytacyjną lub ulubioną muzyką. Zalecamy uruchomienie głośników Bluetooth przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki na najniższej głośności, a następnie stopniowe zwiększanie głośności dożądanego poziomu.

Europejska deklaracja zgodności

Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RohS regulations.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji.

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy. Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Niemcy
info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez CASADA International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody.
Copyright © 2021 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.



