

< relaxmyway

Jade
with heating

QUATTROMED III 



< relaxmyway

Już od założenia w 2000 roku nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty wellness i fitness.

Dzisiaj urządzenia CASADA są dostępne w ponad 40 krajach na świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny styl i surowe nakierowanie na polepszenie jakości życia wyróżniają produkty CASADA tak samo jak niezawodna i najlepsza jakość.

Gratulujemy!

Przez kupno tego urządzenia do masażu udowodnili Państwo Waszą wiedzę na temat zdrowego sposobu życia. Abyście mogli długi czas korzystać z tego systemu, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

Życzymy Państwu wiele przyjemności z Waszym osobistym Quattromed III.

Spis treści

4	Wskazówki bezpieczeństwa
4	Uruchamianie
5	Dane techniczne
5	Wyposażenie / Funkcje
7	Pilot
8	Właściwości
8	Usterki
9	Wskazówki pielęgnacji / Przechowywanie
9	Unijna deklaracja zgodności
9	Warunki gwarancji

Wskazówki bezpieczeństwa



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

- Urządzenie odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymogom bezpieczeństwa.
- Urządzenie nie wymaga częstej konserwacji.
- Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz przeprowadzanie napraw poza autoryzowanym serwisem prowadzi do utraty gwarancji.
- Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
- Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Aby uniknąć ryzyka wystąpienia tzw. krótkiego spięcia, urządzenie należy odłączać od zasilania, jeśli nie jest użytkowane przez dłuższy czas
- Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw. Uszkodzone kable lub wtyczki muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowany personel.
- W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od źródła zasilania.
- Producent ani dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe wskutek nieprawidłowego lub niezgodnego z gwarancją użytkowania urządzenia.
- Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 30 min., aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów.
- Nie należy używać zaostzonych ani ostrych przedmiotów.
- Nie należy korzystać z masażu (również manualnego) podczas ciąży, po niedawno przebytych urazach, w chorobach zakrzepowych, stanach zapalnych i obrzękach ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską przed rozpoczęciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.
- Osoby posiadające wszczepione stymulatory elektroniczne, takie jak np. rozrusznik serca, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Opakowanie produktu nie służy do zabawy – należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

Uruchamianie

Ostrożnie odkręcić dołączonym kluczem imbusowym śrubę z tyłu urządzenia do masażu. Usunąć osłonę i połączyć wtyczkę z adapterem. UWAGA! Śruby NIE przykręcać ponownie

Połączyć adapter z urządzeniem, a wtyczkę wetknąć do gniazdka. Teraz włączyć urządzenie pilotem.

Dane techniczne Quattromed III

Wymiary: 72 x 42 x 8 cm
Waga: 7,8 kg
Napięcie: wkład: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
wyjście: DC 12 V, 3500 mA
Moc znamionowa: 42 W
Automatyczny czas pracy: 15 minut
Certyfikaty:



Wyposażenie / Funkcje



W nowym urządzeniu Quattromed III tradycyjne główki masujące z tworzywa sztucznego zostały zastąpione przez rolki wykonane ze szlachetnych jadeitowych. Naturalna moc jadeitu jest dodatkowo wzmocniana przez zintegrowane w urządzeniu układy podgrzewające.

Ciepło bardzo powoli przenika przez kamień, dopiero po kilku minutach staje się odczuwalne dla użytkownika. Jednak już podczas fazy rozgrzewania ruch obrotowy główek masujących rozluźnia tkanki i usuwa wszelkie stwardnienia i skurcze. Funkcja wibracji pozwala na dodatkową stymulację układu krążenia i układu limfatycznego. Dzięki temu usprawnione zostaje krążenie krwi, znacznie łatwiejsze staje się też oczyszczanie organizmu.

Przed przystąpieniem do masażu urządzenie Quattromed III należy ułożyć na stabilnym krześle lub fotelu. Obciążenie ciałem wzmocnia działanie masażu. Prosimy zwrócić uwagę na wyśrodkowanie całego ciała, aby główki masujące pracowały równoległe do kręgosłupa.



Wyposażenie / Funkcje

Po 15 minutach urządzenie do masażu samo się wyłącza. W celu przedłużenia żywotności silników, głowice masujące należy ponownie włączyć dopiero po co najmniej 30 minutach. W ten sposób silniki mają czas, aby wystygnąć. Również Państwa ciało przyda się ta chwila odpoczynku. Zalecamy przeprowadzanie masażu jedynie dwa-góra trzy razy na dzień, aby również mięśni za mocno nie obciążać.



Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie nasze urządzenia są wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Pod silnym obciążeniem i wysokim naciskiem silniki nagzewają się. Zanim może stać się to zagrożeniem, urządzenia wyłączają się automatycznie i można je ponownie włączyć dopiero po odpowiednim czasie, który wynosi od 30 do 40 minut.



DO ZASTOSOWANIA PRZENOŚNEGO:



Otrzymali Państwo dodatkowo adapter 12V do Quattromed III do zastosowania przenośnego.




Pilot

- [1] On/Off
Przy pomocy tego przycisku urządzenie się włącza względnie wyłącza. Przy wyłączeniu masaż jest zatrzymany a mechanizm automatycznie przechodzi w poniższą pozycję spoczynku.
- [2] Heating
Włączanie względnie wyłączenie funkcji podgrzewania.
- [3] Czasu (5 – 15 minut)
Pierwotne ustawienie czasu masażu wynosi 15 minut. Przy pomocy tego przycisku można dowolnie ustawić czas trwania masażu. (5 minutowe przedziały / 5 – 10 – 15).

WYBÓR OBSZARU DO MASAŻU

- [4] Włączanie / wyłączenie masażu na całym obszarze pleców
- [5] Włączanie / wyłączenie masażu w obszarze ramion, karku.
- [6] Włączanie / wyłączenie masażu w obszarze pleców, lędźwi.
- [7] Vibration (w obszarze siedziska)
Rozpoczynanie / zatrzymywanie masażu wibracyjnego.
- [8] Kneading
Przyciskiem tym można włączyć względnie wyłączyć funkcję knading (ugniatania).
- [9] Reverse (możliwe wyłącznie w trybie kneading)
Przy pomocy tego przycisku można ustalić kierunek obrotu głowic masujących.
- [10] Rolling
Przy pomocy tego przycisku można włączyć względnie wyłączyć funkcję rolling (wałkowania).
- [11] Width (możliwe wyłącznie w trybie rolling)
Przyciskiem tym podczas masowania wałkami można zmienić odstęp głowic masujących.
- [12] Spot (możliwe wyłącznie w trybie kneading)
Przez przytrzymanie naciśniętych przycisków można poruszać pozycję głowic masujących w górę i w dół. Po puszczeniu danego przycisku mechanizm się zatrzymuje w wybranym miejscu.

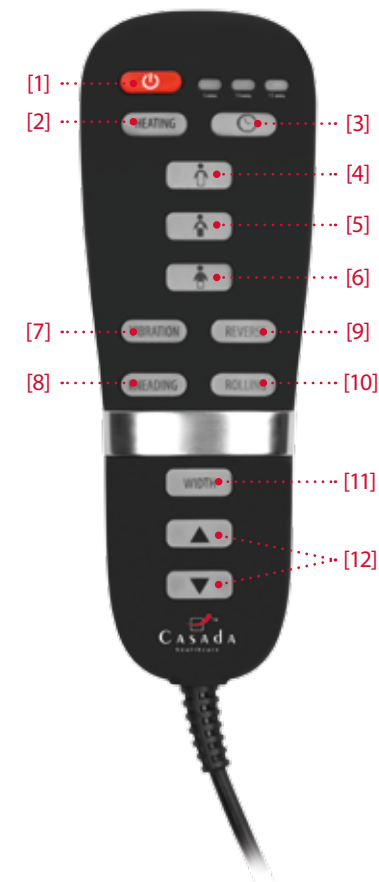

Właściwości

UGNIATANIE

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.

WIBRACJA

Całe ciało zostaje wprowadzone w wibracje o jednostajnej częstotliwości, docierające w głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.

WAŁKOWANIE

Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.

OGRZEWANIE

Dogłębne, promieniujące działanie, wspomagające proces relaksacji, dobroczynnie wpływające na napięcie mięśniowe.

OGRZEWANIE NEFRYTOWE

Nefryt jest minerałem przewodzącym ciepło. W głowicach masujących zastosowano nefryt wysokiej klasy, aby wzmocnić efekt ogrzewania i relaksacji.



Usterki

Usterka

Urządzenie jest podłączone do prądu i ani urządzenie, ani pilot nie funkcjonuje.

Usuwanie

- Sprawdzić połączenie kabla zasilacza
- Przy za długim używaniu urządzenie może się przegrzać. Wyłączyć je i pozostawić do ostygnięcia przez 30 - 50 minut.

Wskazówki pielęgnacji / Przechowywanie

By zapewnić bezpieczne użytkowanie Quattromed III i jednocześnie przedłużyć jego żywotność, należy regularnie pielęgnować urządzenie.

1. Zalecane przechowywanie: suche i bezpyłowe miejsca.
2. Chronić przed wilgocią i ogniem.
3. Czyścić suchą i miękką ściereką.
4. Wyłączyć Quattromed III z sieci elektrycznej po zakończeniu używania.

Unijna deklaracja zgodności

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU i LVD 2014/35/EU.

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do rozszczenia gwarancji jest okazanie dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem do rozszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upływem obowiązującego czasu gwarancji. Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez Casada International GmbH i nie mogą być wykorzystywane bez otrzymania zgody.

Copyright © 2016 Casada International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.



